

### Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	30-4-2020
Inkoopnummer	301274
Lotnummer	649
Leverancier	
Productnaam of naam fabrikant	
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	100%	P3
0,5	100%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	< 10	20
Testpersoon 2	108	
Testpersoon 3	177	
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL	<input checked="" type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			
Oordeel AH/TOXI	+		
Algemene bevindingen:			

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen: Lot bevat 2 verschillende maskers waarvan 1 soort zeer slecht uit de fit komt		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7	X	Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

### Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer	301274.	LOT-nummer	6ug
Datum uitvoering check	30-4-2020		
Leveringsdatum	Jiangxi Hornet		
Leverancier	Jiangxi Hornet		
Productnaam of naam fabrikant			
Productiedatum			
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			
Advies:	In één lot zitten twee verschillende maskers		
Type masker bij uitgifte:	De slechtste versie heeft slechte fitting → afkeur!		

#### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

#### Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Print op masker niet conform vereisten. (CE & FDA) op verpakking niet conform norm (geen NoBo).	

#### Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	De wolklaag (2) in masker zie ik niet terug in laag op bouw doos. Fittest Er zijn maskers met fijne rand en grove rand. ↑ ↑ zeer slechte fittest      goede fittest. 1 Opbouw lagen lijkt gelijk. Fittest wijkt af.
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>25</i>
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:  <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <i>3D Nano Facial Protective mask</i>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>Jiangxi Homet-</i>
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL-2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <i>3 jaar na 20-4-2020</i>

## Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <i>per 2</i> <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <input checked="" type="checkbox"/> <i>blanco zalije</i>

## Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>metalen neus beugel zit in het echte masker op <del>de</del> het masker.</i>
3	Wat staat er op het masker: KN 95 SB 2626 - 2006
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <i>buiten</i> <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <i>dik polyprop. Wollig</i> <i>plastic polyprop</i> <i>polyprop</i> <i>polyprop</i>
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <i>Grove strakke elastiek</i> <i>Fijne kanten elastiek</i> <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

**Bijzonderheden:**

De volgende op de doos:

1. PP non woven 60 gr. =
2. PP electrost. filt 45 gr.
3. PTFE - Nano filtration 11 gr.
4. PP nonwoven 30 gr.
5. PPElectrost. filt. 45 gr
6. nonwoven 30 gr. =

Grove Maskes.

1. PP non woven 60 gr.
2. Wol laag.
- 3/4 PP non woven met plastic erop
5. nonwoven 30 gr
6. non woven - 30 gr.

Fijne masker

1. PP nonwoven 60
2. Wol
- 3/4 non woven plastic
- 5 non woven 30
6. non woven 30
- 4

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <i>ook bij fitting</i> <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leakttest	<input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input checked="" type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input checked="" type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

**Bijzonderheden:**

## Particle Penetration by Kalibra

Datum	29 april 2020
Inkoopnummer	301274
LOT/X-nummer	649

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	100%	Pass P3	100%	Pass P3
Masker 2	100%	Pass P3	100%	Pass P3
Masker 3	100%	Pass P3	100%	Pass P3
<b>Totaal gemiddelde</b>	100%	Pass P3	100%	Pass P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	110 Pa	< 240 Pa	Pass
Masker 2	182 Pa		Pass
Masker 3	127 Pa		Pass

### Eindoordeel > 0,3

Voldoet aan FFP3

### Eindoordeel > 0,5

Voldoet aan FFP3


5.1.2e

**Fittest by RIVM**

Datum	30-4-2020
LOT/X-nummer	649

Fit factor real time test < 10	<input type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. 5.1.2e	groot Fgw	185		
2. 5.1.2e		< 10		23
3. _____				
4. _____				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?				
			Is één clip voldoende?	

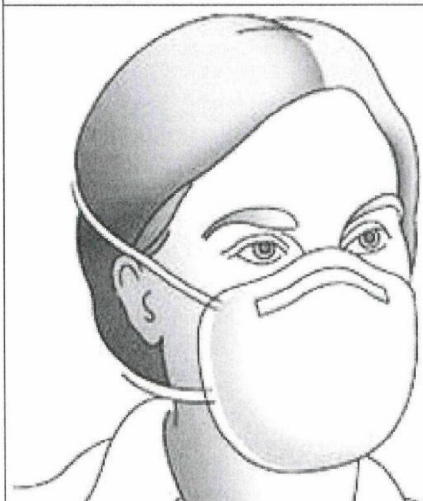

Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)

Type FFP Masker	
Fit test (FAIL of PASS)	

## Fittest by RIVM

Datum	30-4-2020
LOT/X-nummer	649

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip
--------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Tester:	Score	
	Zonder clip	Met clip
5.1.2e	110	29
5.1.2e	108	
5.1.2e	177	

	Opmerkingen	
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)	neusbeugel dun bij "op" en buigen	
Verschuift bij Up & Down/Bending?	rand markeren bij de heus	
Is één clip voldoende?	evenzandruimte helpt.	
Extra opmerkingen		

Type FFP Masker	
Fit test (FAIL of PASS)	

### Fittest by RIVM

Datum	29-6-20
LOT/X-nummer	649

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip
--------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Tester:	Score	
	Zonder clip	Met clip
5.1.2e	< 10	20
5.1.2e	< 10	27

	Opmerkingen	
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)		
Vershuift bij Up & Down/Bending?		Nee
Is één clip voldoende?		ja
Extra opmerkingen	zit fijn	bul bestaat

Type FFP Masker	FFP3
Fit test (FAIL of PASS)	Fail

Verskillende presentatie bij Pittent!

maakt bij het aflezen  $\mu$  uit de test keuzen.

gevraagd om beide ingevulde Pittenten,

5.1.2e

Fig. Belynd en grafen Belynd.  
om de graf in de oorclassificatie

In  $\mu$  voor twee oortent?

## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e

Datum: 20-4-2020

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer 649

Aantal pallets 13

Totaal stuks 140.000

Aantal samples 75

Totaal aantal na samples 139.925

Aantal per pallet 11.000

Aantal per doos 1000

Aantal per verpakkingseenheid 25

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: \_\_\_\_\_

Paraaf: \_\_\_\_\_

Artikelnummer: 958

Inkooporder nummer 301274

LCH-nummer

3057-23160-JEC 01

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

5.1.2h

ingeboekt door:

2

Exemplaire pour destinataire  
Exemplaar voor geadresseerde  
Exemplar für Empfänger

**LETRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT**  
**VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT**  
**FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT**

**CMR** **AVC** 25

Code Vervoercode  
Code Frachtführer

No. Nr.

1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land)  
5.1.2e Logistics (Netherlands) B.V.  
Care of: Halma Solutions BV  
Shannonweg 11  
1118 LA Luchthaven Schiphol  
The Netherlands

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in tv. verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.

Indien de overeenkomst van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.  
De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

NL 26

2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land)  
Empfänger (Name, Anschrift, Land)  
Centraal Boekhuis  
Laanakkerweg 14  
4131 PB Vianen  
The Netherlands

16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land)  
Frachtführer (Name, Anschrift, Land)  
Schiphol Express  
Shannonweg 11  
1118 LA Luchthaven Schiphol  
The Netherlands

H/2

3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)  
Laanakkerweg 14  
4131 PB Vianen NL

17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land)  
Naam, adres, land  
5.1.2e  
H00770000 NL

4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag de Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)  
THE NETHERLANDS 24/04/20

18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder  
Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers  
337471

5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten  
Beigefügte Dokumente

Dossier: 430/319376  
Ref: REF 3057-23160

6 Marques et numéros / Merken en nummers Kerenschen und Nummern	7 Nombre de colis / Aantal coli Anzahl der Pakstücke	8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking Art der Verpackung	9 Nature de la marchandise / Aard der goederen Bezeichnung des Gutes	10 No statistique / Statistiek nummer / Statistieknummer	11 Poids brut / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg	12 Cubage m3 / Volume in m3 Umfang in m3
784-13663646 TCG200429AE	160	CTNS Face Mask			1523,000	16,48

Nabestellen: www.cmirconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingetrahnten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

LEVERANCIER: HALMA SOLUTIONS  
PRODUCT CODE: X016 JELLE  
VERPLICHTINGENNUMMER: 3057-23160  
QUANTITY IN PIECES: 140.000 PCS  
QUANTITY IN CARTON: 140 CTNS

2752 VOL  
47  
B2

13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender  
Anweisungen des Absenders  
The receiver of the goods, through signing in box 24, will be liable for the correct and timely processing of the attached NCTS documents (T1).

19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten  
Besondere Vereinbarungen  
In case of discrepancies and/ or events concerning transport & delivery please contact a.s.a.p.:  
5.1.2e logistics Netherlands  
5.1.2e

14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift  
Frachtzahlungsanweisungen  
 Franco / Frei  
 Non franco / Niet franco / Unfrei

20

Arrivé heure / Aankomsttijd Ankuntszeit	Depart heure / Vertrektijd Abfahrtszeit	Total heure / Totaaltijd Gesamtzeit
Adresse de chargement: Laadadres: Ladeadresse:	Adresse de déchargement: Losadres: Entladeadresse:	

21 Etablie à / Opgemaakt te  
Ausgefertigt in le / de  
am

15 Reimbursement / Remboursement / Rückerstattung

22 Luchthaven Schiphol 24/04/20  
23  
5.1.2e Log  
Care of: Halma Solutions B  
Shannonweg 11  
1118 LA Luchthaven Schiphol  
The Netherlands

24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen  
Erasmusweg 10  
Luchthaven Schiphol  
VIANEN 4131 PB  
Tel. 5.1.2e



Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders

Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers

Signature et timbre du destinataire / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Empfängers