

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	28-5
Lotnummer	1263
Leverancier/LCH-nummer	2020-006402
Productnaam of naam fabrikant	
Productiedatum	20-4-2020.
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	950

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Type P1/P2/P3
Masker 1	95%	P2
Masker 2	92%	P1
Masker 3	96%	P2

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	153	
Testpersoon 2	35	70
Testpersoon 3	8,6	37
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL <input checked="" type="checkbox"/> PASS	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
958	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen: Maskers verschillen onderling - PFE faalt bij 1 uit 3 maskers (P1 kwaliteit). Filter doet voldoet wel (2 uit 3 S33).		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4	X	Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)	Ja	80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer	303108	LOT-nummer	1263
Datum uitvoering check	29-5-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	V6 WCL-0075 - Changshu Heang Sun		
Productnaam of naam fabrikant	KN95 - Respirator Masker		
Productiedatum	20-4-2020		
Naam	[Redacted]		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			
Advies:	Goede		
Type masker bij uitgifte:	nut		

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	Masker voldoet niet op PFE. Maskers verschillen onderling ook. Fit is voldoende, zowel met als zonder inzet 1/2 clip. Score: >33 bij 2 1/23.
----------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>20 stuks; per 5 in transparant zeleje in doos</i>
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde; <i>word al geopenet.</i> <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <i>KN 95 Respirator Maskes.</i>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>Changshu Meiwu Yun -</i>
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW--) <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <i>2 years op product certificate</i>

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: <i>per 5 in transparant folie</i>	
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: - Vastheid in materiaal buitenzijde masker - Witsleutelvoers rond markering gesnoel - PFE ook witsleutel resultaat.
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: KN95
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: wit wit PP 2x witsleutel. inart PP <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof met metalen kern in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

*2re fittest
niet uitgenomen
falsche*

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht? <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest <input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt? <input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>
5	Behoudt de neusklem zijn vorm gedurende circa 1 min? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
6	Chirurgisch masker: Wat is de hoogte van het masker wanneer deze uitgevouwen is?
7	Chirurgisch masker: wat is de lengte van de neusklem?

Bijzonderheden:

fit voldoet. Zowel met als zonder inzet vel clip. 2 v/et 3 hebben een score > 33.




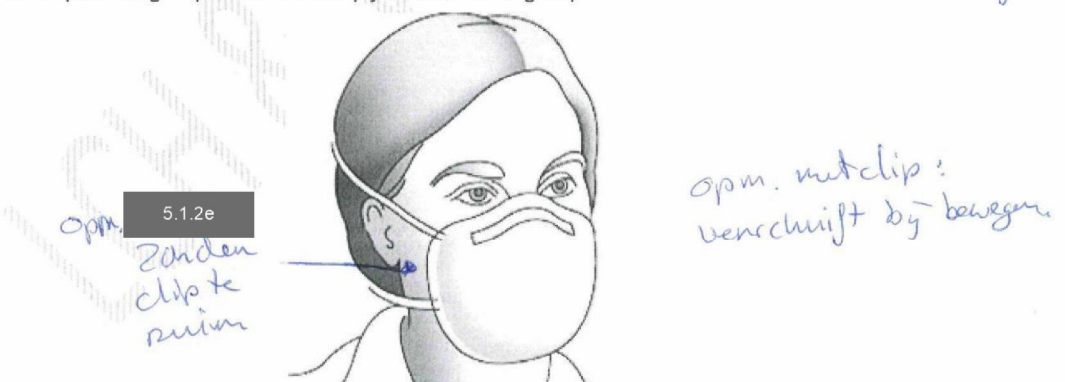
Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

LCH & VWS Use Only

Fittest by RIVM

Datum	29/5/2020
LOT/X-nummer	1263

Fit factor real time test < 10	<input type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input checked="" type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	---	---

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. 	(1)	153		
2. 5.1.2e	(2)	35		70
3. 	(3)	8,6		37
4. 				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?		Nee/ja		
			Is één clip voldoende?	ja
Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)				
				

Type FFP Masker	~
Fit test (FAIL of PASS)	Pass met clip.

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Particle Penetration by Kalibra

Datum	28-05-2020
Inkoopnummer	303108.
LOT/X-nummer	1263

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	95%	Pass P ₂	99%	Pass P ₃
Masker 2	92%	" P ₁	98%	" P ₂
Masker 3	96%	" P ₂	99%	" P ₃
Totaal gemiddelde	94%	" P ₂	99%	" P ₃

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	139	< 240 Pa	Pass
Masker 2	120		Pass
Masker 3	116		Pass

Eindoordeel > 0,3
voldoet aan P ₂
Eindoordeel > 0,5
voldoet aan P ₃

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

28-05

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

1263

Aantal pallets

6

Totaal stuks

107200

Aantal samples

60

Totaal aantal na samples

107140

Aantal per pallet

19200

Aantal per doos

1600

Aantal per verpakkingseenheid

20

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

950

Inkooporder nummer

303100

LCH-nummer

2020-0064-02b

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

015 - 044 - 03

ingeboekt door:

015 054 03



Exemplaire pour destination
 Entrer par le port de destination
 Empfänger für den Bestimmungsort

LETTRÉ DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT
 VERTIJKELIJK VERVOERDOCUMENT
 FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOCUMENT



Code transporteur
 Vervoerscode
 Code Frachtwagen

Indien de overeenkomst plaats van toezichtgeving en van aflevering van de zaken zij gegeven in Nederland, wordt de overeenkomst aan de wetgeving van Nederland onderworpen.
 In case of dispute, the contract shall be subject to the law of the Netherlands.

1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Absender (Name, adres, land)
 Aankomst (Namen, adres, land)
NLH

Indien de overeenkomst plaats van toezichtgeving en van aflevering van de zaken zij gegeven in Nederland, wordt de overeenkomst aan de wetgeving van Nederland onderworpen.
 In case of dispute, the contract shall be subject to the law of the Netherlands.

2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Bestemmende (Name, adres, land)
Schiphol

16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (Name, adres, land)
 Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
VertiKleij
VeriTransport
 Rietkraag 9 - 3411 CN Lopik - NL
 Mobil: 06-46-123456

3 Lieu de prise en charge / Le point de la marchandise (lieu, pays) / Fracht (Bestand) voor de aflevering
5.1.2h

17 Transporteur de la marchandise (nom, adresse, pays) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
5.1.2h

4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. ontvangst-
 neming der goederen (Plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)
Schiphol 28.05.20

18 Résumés et observations du transporteur / Voorbehoed en opmerkingen van de vervoerder
 Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers

5 Documents annexes / Bijgevoegde documenten
32 Europallets met schu goedere

10 No. de l'expédition (Numéro) / Verzendnummer
 11 Post No. et Région (Postnummer) / Postnummer en regio
 12 Numéro de l'avis de réception (Numéro) / Ontvangstnummer

6 Nom et adresse / Nom et adresse
 7 Voies de route / Routes
 8 Mode d'emballage / Verpakking
 9 Nature des marchandises / Beschrijving der goederen

1-15 y compris et / inbegrepen einschließlich
 19+21+22
 5.1.2e
*LCH-2020 - 0064 - 02 -> 6 pallets
 - LCH-2020 - 0068 - 17 -> 16 pallets
 - LCH-2020 - 0015 - 01 -> 10 pallets*

19 Conditions particulières / Speciale overeenkomsten
 Besondere Verehringungen

13 Indications de l'expéditeur / Instructies afzender
 Anweisungen des Absenders
200pallets: 02376763

20 A l'usage de l'expéditeur / Aanwijzingen voor de afzender
 Voor de afzender
 21 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Absender (Name, adres, land)
 22 Destinataire (nom, adresse, pays) / Bestemmende (Name, adres, land)

14 Prescriptions de classement / Frankingsvoorschrift
 Frachtklassifizierungsanweisungen
 Franco / Free
 Non Franco / Not franco / Unfrei

23 Nature des marchandises / Beschrijving der goederen
 Beschrijving der goederen
 24 Nature des reines / Goederen omtrekking
 Beschrijving der goederen omtrekking

21 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Absender (Name, adres, land)
Schiphol 28.05.20

15 Remarque / Opmerking
Centraal Boekhuis BV
 koprende Goederen
 24 Nature des reines / Goederen omtrekking
 Beschrijving der goederen omtrekking
 and VOOR SCHIJTAL ONTVANGEN PALLETS
 CN
 x pallets



LA 42
 van de afzender / Urschrift, und Stempel des Absenders

Signature et timbre de destination / Handtekening en stempel
 van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers

A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Ausfüllen unter der Verantwortung des Absenders

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingerahmten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden