


Bedankt dat je denkt aan de SARSLIVA studie. Hieronder vind je de instructies voor de sample afname. Hiervoor heb je alle materialen in het zakje nodig.

Instructie sample afname bij inclusie

1. Speeksel kwijlbuis:

Pak de buis met de blauwe dop
Draai de dop van de buis en instrueer de patiënt om speeksel in de buis te laten druipen, tot aan het onderste streepje (bij pijl in Figuur)
Draai de dop dicht en zwenk 3 keer

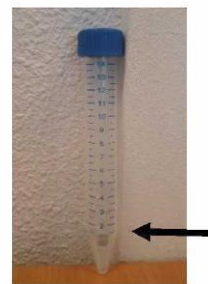

2. Speekselwat:

Neem het buisje met de rode dop en het los verpakte wattenstokje
Draag nieuwe handschoenen! Als de patiënt het zelf doet moet hij/zij handschoenen aandoen.
Strijk met het wattenstokje 3x over het linkerwangslimvlies, 3x over de tong en 3x over het rechterwangslimvlies, of instrueer de patiënt dit zelf te doen
Draai de rode dop van de buis
Duw het wattenstokje in het buisje en trek het stokje terug
Het watje blijft achter in het buisje
Draai de dop dicht en zwenk 3 keer



3. Keelwat:

Zorg dat je goed zicht hebt op de keelholte, evt. door de tongspatel te gebruiken
Breng de wattenstaaf naar achteren, vermijd hierbij de huid
Haal de wattenstaaf enkele keren op en neer over de oropharyngeale achterwand en ga bij verlaten van de mond langs een van de tonsillen
Plaats de wattenstaaf in het buisje met de roze dop en breek de staaf af op het aangegeven breekpunt
Draai de dop dicht en zwenk 3 keer



4. Neuswat:

Maak evt. de neusgaten toegankelijker door de neus omhoog te duwen
Breng de flexibele wattenstaaf via een neusgat over de neusbodem recht naar achteren tot de weerstand van de achterste pharynxwand wordt gevoeld
Draai de wattenstaaf voorzichtig om tegen de nasofarynxwand
Plaats de wattenstaaf in het buisje met de blauwe dop en breek de staaf af op het aangegeven breekpunt
Draai de dop dicht en zwenk 3 keer



NB plaats de neus- en keelwat dus niet samen in een buisje.

Alle 4 de buizen kunnen voorzien van de bijgeleverde etiketten en met een ingevuld studielabformulier in het zakje geplaatst worden en via de gebruikelijke route naar het Streeklab. Desinfecteer de buitenkant van het zakje met een Oxywipe voor verzending. Vermeld afnamedatum en -tijd op het studielabformulier en in EPIC.