

Loodsrapport van Koolwijk Op- & Overslag B.V.

Inslag Nr.: 87319

Dossier Nr.: 66846

Datum: 21-03-2020
Klant: ERASMUS MEDISCH CENTRUM
Autonr.: 5.1.2h /
Referentie: DHL

Goederen omschrijving: MONDKAPJES FFP 2
Aantal colli: 52000 PCS
Aantal pallets: Hoeveelheid per pallet: -
Bruto gewicht: 0 KG
Containers:

Staat van de goederen:

Aantal stuks met schade:

Schade:

Lot nr.: _____

Hout / Plastic / Euro pallet : _____

Prod. Datum: _____

Gelost door: _____

T.H.T. _____

Geteld door: _____


Palletfactor _____

Overige opmerkingen:

Gelost in vak/loods/stelling:

Opmerkingen voordat er gelost gaat worden:
52 DOZEN. AANTAL STUKS DOORGEVEN

ATTENTIE CHAUFFEURS:
VOOR AANVANG VAN HET LOSSEN AAN DE RAMPEN 1 T/M 4
EERST EEN WIELKEG VOOR DE WIELEN LEGGEN !!!!!!!!!!!!!!!

			HAWB WAYBILLNUMBER
 ORIGIN	DATE	DESTINATION	776854
CN	21-3-2020	NL	

SHIPPER	CONSIGNEE
MDX GROUP LTD. GUANGZHOU CHINA	KOOTWIJK LOGISTICS TRANSPORTSTRAAT 2 2861DZ BERGAMBACHT
MAWB: 784-1277.6853	INDUSTRIE TERREIN DE NIEUWE WETERING

PIECES	DESCRIPTION				
52x	Despoasble Mask	DELIVERY ASAP.			
520KG					
L	W	H	DIM.WEIGHT	DECL.VALUE	RECEIVED BY (PRINT NAME)
60x40x40cm			832kg	X	KOOTWIJK LOGISTICS OVERSLAG B.V. Transportstraat 2 2861 DZ BERGAMBACHT

DATE: 21/3 TIME: 0182 - 35 17 99

Checklist N95 1860 facemask

Datum: 23-03-2020

Naam:

5.1.2e

Functie:

Naam:

Functie:

Naam:

Functie:

Definitie steekproef:

- 3 vrachtwagens, per vrachtwagen het volgende controleren:
 - Min. 1 pallet per vrachtwagen of 3 random pallets in het magazijn
 - Per pallet: minimaal 3 omdozen openen en aantal binnendozen tellen
 - 1 binnendoos openen en beoordelen

	Aantal beoordelingen	
1	Aantal pallets beoordeeld	
2	Aantal omdozen beoordeeld	
3	Aantal binnendozen beoordeeld	
4	Aantal maskers beoordeeld	

Classificatie: FFP2

Inslagbonnr: 66846

Handtekening:

5.1.2e

Datum: 23-03-2020

1

In overleg met

5.1.2e

(RUM)

Voor de gehele partij geldt:

Criteria gehele partij :		
1	Aantal pallets?	
2	Aantal omdozen per pallet	
	Totaal aantal omdozen	
3	Aantal binnendozen per omdoos 1 in steekproef:	
4	Aantal binnendozen per omdoos 2 in steekproef:	
5	Aantal binnendozen per omdoos 3 in steekproef:	
6	Totaal aantal binnendozen (aantal pallets x aantal omdozen x aantal binnendozen per omdoos):	
7	Totaal aantal maskers:	
8	Technical data sheet aanwezig?	
9	Garantiecertificaat aanwezig?	
10	Declaration of conformity aanwezig?	
11	Opslag condities (droog / nat / overdekt etc) (opslag tussen -20°C en +30°C en < 80%RH)	
12	Temperatuur opslag geconditioneerd?	

Oordeel:

Overige aanmerkingen:

Voor de afzonderlijke omdoos, binnendozen en maskers geldt:

	Criteria OMDOOS:	Opmerking
1	<i>Omdoos</i> met 3M print, productsticker (type aanduiding, barcodering, lot no., zie foto in de bijlage)	
2	Maat omdoos (lxbxh)	
3	Staan op de omdoos de volgende symbolen? (zie beneden)	
4	Maat binnendoos (lxbxh)	
5	Aantal omdoos per pallet	
6	Algemene indruk verpakking	
8	Algemene indruk omdoos (integriteit, vochtplekken etc)	
9	Aantal binnendozen per omdoos?	

Oordeel:

Overige aanmerkingen:

	Criteria BINNENDOOS :	GEEN
1	Aantal maskers per binnendoos? Aantal vermelden:	
2	Algemene indruk binnendoos (integriteit, vochtplekken etc)	
3	Staat de tekst '3M 1860' op de binnendoos?	
4	Is het logo 3M rood op de binnendoos?	
5	Staat de tekst 'N95 respirator' op de binnendoos?	
6	Expiratie datum op <i>binnendoos</i> (shelf life max. 5 jaar) noteren	

Oordeel:

Overige aanmerkingen:


	Criteria MASKERS:	
	✓ ✓ ✓	
1	Algemene indruk masker (integriteit, vochtplekken, geur etc)	Geen aanmerkingen
2	Teksten op voorzijde masker volgens 3M spec's (zie foto bijlage) <ul style="list-style-type: none"> • 3M • 1860 • NIOSH • N95 • Lot no..... • TC 84 A 0006 • Onder de rechthoek: HEALTH CARE PARTICULATE RESPIRATOR AND SURGICAL MASK • In kleine letters: For proper respirator use wearer must be trained and comply with the instructions on the box. For assistance see your supervisor or call 3M at 1-800-288-3957 • Driehoek met uitroeptekens en tekst 'ATTENTION' eronder 	G 32686-2006 op verpakking; Op maskers <u>geen tekst.</u>
3	Staat op het bovenste elastiekje de tekst: 'For proper respirator use wearer must be trained and comply with the instructions on the box. For assistance see your supervisor or call 3M at 1-800-288-3957'	geen tekst op elastiekjes
4	Staat op het bovenste elastiekje de tekst: Driehoek met uitroeptekens en tekst 'ATTENTION' eraan	/
5	Voorzijde masker: komt deze overeen met de foto in de bijlage?	/
6	Gelaagdheid masker: komt deze overeen met de foto in de bijlage?	/
7	Binnenkant masker: komt deze overeen met de foto in de bijlage?	
8	Materiaal soort (non woven)	✓ 4 lagen
9	Aantal lagen?	→

Oordeel:


Overige aanmerkingen:

BULAGE 1: tekst op masker

CDC: (https://www.cdc.gov/niosh/nppt/topics/respirators/disp_part/images/MarkingsPrint.png)
https://www.cdc.gov/niosh/nppt/topics/respirators/disp_part/default.html

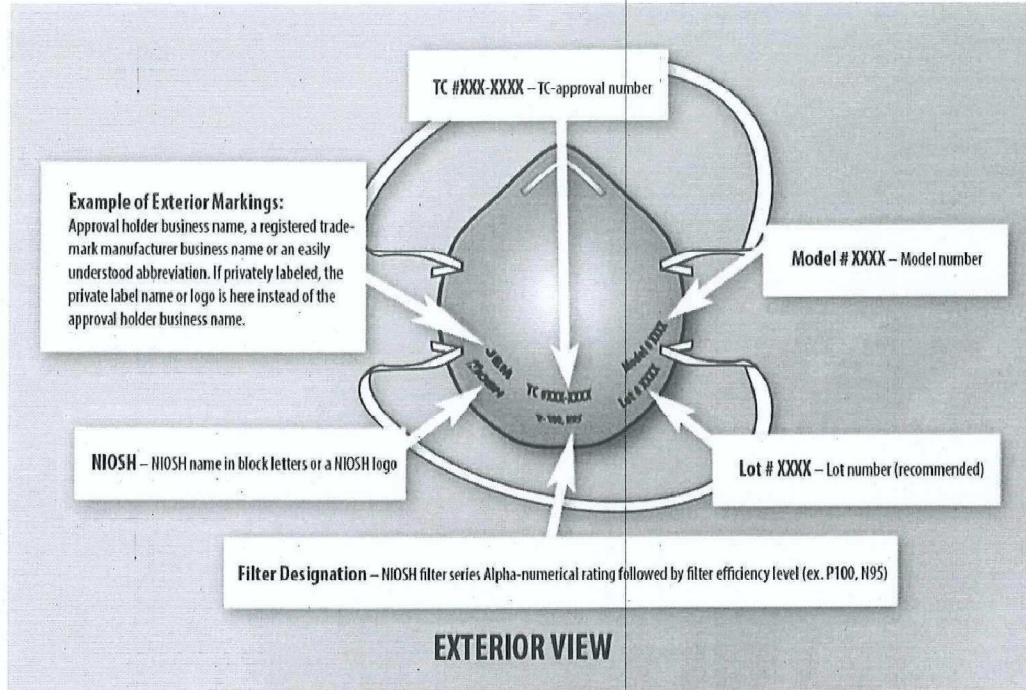


BIJLAGE 2: Symbolen op verpakking + uitleg

 Use by Date

Here are some additional symbols that you will see in the updated instructions for use.

 Date of Manufacture

 Manufacturer's Lot Number relevant to the device bearing the symbol

 Manufacturer

BIJLAGE 3: Foto opslag




BIJLAGE 4: Foto omdoos


3M **N95**

Health Care Particulate Respirator and Surgical Mask
Respirateur contre les particules pour soins de santé
et masque chirurgical
Respirador para partículas y mascarilla quirúrgica para
cuidado de la salud

1860

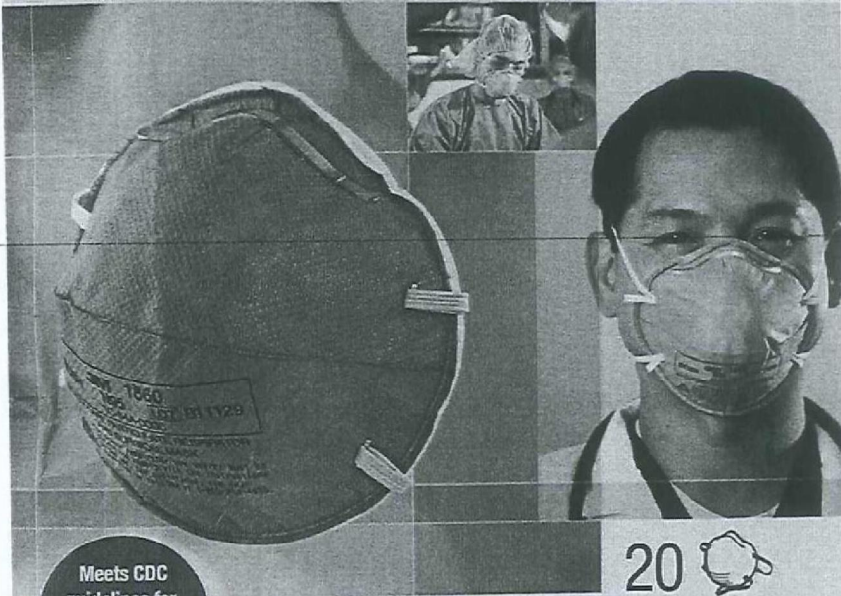

Meets CDC
guidelines for
M. tuberculosis
exposure
control

20 
contenido 20 respiradores

BIJLAGE 5: Foto voorzijde



BIJLAGE 6: Foto gelaagdheid



BIJLAGE 7: Foto binnenkant

