

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	6-5
Inkoopnummer	30165
Lotnummer	759
Leverancier	Halma
Productnaam of naam fabrikant	Stac buss
Productiedatum	26/4
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	99%	P3
0,5	100%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	< 10	59
Testpersoon 2	< 10	23
Testpersoon 3	< 10	14
FFP2	<input checked="" type="checkbox"/> FAIL	<input type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			—
Oordeel AH/TOXI			—
Algemene bevindingen: Slechte fittest mogelijk te verklaren doordat alle maskers in deze partij slecht zijn afgewerkt aan onderzijde. Aldere maskers hebben "fijne" rand.			

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
958	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen:		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	X	Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood	Ja	>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer	301615	LOT-nummer	754.
Datum uitvoering check	8-5-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	Starbass Halma		
Productnaam of naam fabrikant	3D Nano Facial Protective mask		
Productiedatum	28-4-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie		5.1.2e	
Besproken met RIVM	5.1.2e		
Advies:			
Type masker bij uitgifte:			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	EN149 vermeld op de doos, geen CE mark op doos en maskers. GB2626, maar geen fabrikant op maskers.	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	<p>+ filtermateriaal +</p> <p>- staat niet dat medewerkers zelftest doet in instructie</p> <p>-- deze hele partij bestaat uit maskers met zg. fijne rand. Ze zijn slordig aan elkaar gestikt en dit verklaart waarschijnlijk de slechte fittest</p>
--------------------------	---

- mensbeugel wordt als slap ervaren
- slechte fit test.

1

5.1.2e

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	16
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <i>deel van de doos is sterk gedeukt</i> <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	3D nano Facial protective mask
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Stam buss
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <i>productie</i> <i>3 jaar na productiedatum: 28-4-2020</i>

Bijzonderheden:

twel

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER ^S		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:	
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>Plantje op verpakking heeft ingestelde neusveugel.</i>
3	Wat staat er op het masker: <i>KN 95 SB 2626-2006</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <i>buiten</i> <input checked="" type="checkbox"/> 1 wit <input checked="" type="checkbox"/> 2 wol <input checked="" type="checkbox"/> 3 laag nano <input checked="" type="checkbox"/> 4 wit <input checked="" type="checkbox"/> 5 wit
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input type="checkbox"/> Erop gestanst <input checked="" type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input type="checkbox"/> Goed stevig vast <input checked="" type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input checked="" type="checkbox"/> Neus <input checked="" type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

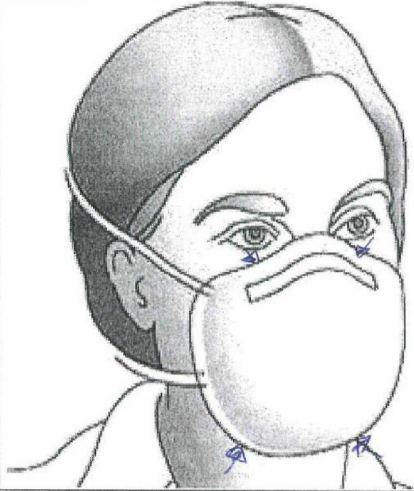
Bijzonderheden:

Fittest by RIVM

Datum	6-5-20
LOT/X-nummer	lot 754

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	--

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. 5.1.2e		10		59
2. 5.1.2e		10	.benaauwd masker zit op zich lekker goed fit	23
3. 5.1.2e		<10		14
4. _____				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?				ja
			Is één clip voldoende?	

	5.1.2e	uiteinden van neus - beugel gaan omhoog staan. komen daar bij iets los vd stof. metaal is slap
Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)		

Type FFP Masker	FFP2
Fit test (FAIL of PASS)	FAIL

Particle Penetration by Kalibra

Datum	07-05-2020.
Inkoopnummer	301615
LOT/X-nummer	754

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1 Pass 1	99%	Pass P3	100%	Pass P3
Masker 2 Pass 2	99%	Pass P3	99%	Pass P3
Masker 3 Pass 3	99%	Pass P3	100%	Pass P3
Totaal gemiddelde	99%	Pass P3	100%	Pass P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	133	< 240 Pa	Pass
Masker 2	122		Pass
Masker 3	104		Pass.

Eindoordeel > 0,3

Valdaet P3.

Eindoordeel > 0,5

Valdaet P3.

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

6-5

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

754

Aantal pallets

16

Totaal stuks

108.864

Aantal samples

64

Totaal aantal na samples

108.800

Aantal per pallet

6912

Aantal per doos

576

Aantal per verpakkingseenheid

16

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

958

Inkooporder nummer

301615

LCH-nummer

3057-23160 (STA 0506)

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

5.1.2h

ingeboekt door:

2

Exemple pour / Exemplaar voor / Exemplar für Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) APEX Global logistics Fokkerweg 300, Fokker 5 1438 AN, Oude-Meer		Destinataire / Geadresseerde / Empfänger Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) Centraal Broekhuis Laanakkerweg 14 4131 PB Vianen		LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT / VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT / FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT CMR AVC 25 Code transporteur / Vervoerderscode / Code Frachtführer No Nr															
1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) Absender (Name, Anschrift, Land) APEX Global logistics Fokkerweg 300, Fokker 5 1438 AN, Oude-Meer		Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. NL Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.																	
2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Empfänger (Name, Anschrift, Land) Centraal Broekhuis Laanakkerweg 14 4131 PB Vianen		16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) Frachtführer (Name, Anschrift, Land) CAG TRANSPORT																	
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land) 4131 PB Vianen		17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)																	
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und tag de Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum) Oude Meer		18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers Loading ref :truck 09:00 AM																	
5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten Beigefügte Dokumente N/A																			
6 Marques et numéros / Merken en nummers / Kennzeichen und Nummern 7 Nombre de colis / Aantal coli. / Anzahl der Packstücke 8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking / Art der Verpackung 9 Nature de la marchandise / Aard der goederen / Bezeichnung des Gutes 10 No stekelijke / Statisch nummer / Statische nummer 11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg 12 Cubage m3 / Volume in m3 / Umlang in m3		<table border="1"> <tr> <td>826-0014 8186</td> <td>X 019</td> <td>STARBOSS</td> <td>190</td> <td>Pieces</td> <td>3263</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>826-00148470</td> <td>X 016</td> <td>JELLE</td> <td>183</td> <td>Pieces</td> <td>2839</td> <td>kg</td> </tr> </table>				826-0014 8186	X 019	STARBOSS	190	Pieces	3263	kg	826-00148470	X 016	JELLE	183	Pieces	2839	kg
826-0014 8186	X 019	STARBOSS	190	Pieces	3263	kg													
826-00148470	X 016	JELLE	183	Pieces	2839	kg													
13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender / Anweisungen des Absenders DEL REF: 3057-23160 Delivery TUE 05/05/20		19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten / Besondere Vereinbarungen 20 Arrivé / Aankomsttijd / Depart heure / Vertrektijd / Total heure / Totaaltijd Adresse de chargement: Centraal Broekhuis BV Laadadres: Afd. Inkomende Goederen Ladeadresse: Getekend voor aantal ontvangen pallets Adresse de déchargement: CB Losadres: 25 WELGWERP PALLETS BELAST Endeadresse: 25 WELGWERP PALLETS BELAST																	
14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift / Frachtzahlungsanweisungen <input type="checkbox"/> Franco / Frei <input type="checkbox"/> Non franco / Niet franco / Unfrei		15 Reimbursement / Remboursement / Rückerstattung 21 Etablie à / Opgemaakt te / Ort / am Oude Meer 03/05/20																	
22 Apex Global Logistics (NL) B.V. Fokkerweg 300, Fokker 5 1438 AN, Oude-Meer 5.1.2e		23 5.1.2e		24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen / Gut empfangen Lieu / Plaats / Ort le / de am 5.1.2e															
Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders 5.1.2e		Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers 5.1.2e		Signature et timbre du destinataire / Handtekening en stempel van de geadresseerde / Unterschrift und Stempel des Empfängers 5.1.2e															

Nabestellen: www.logistiekconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999
 Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingetragenen Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden
 1-15, 19 + 21 + 22
 version 7.0 2801/19 model IRU
 To be completed on the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders
 To be completed on the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders
 To be completed on the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders
 To be completed on the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders

2019-05-05 10:00
 2019-05-05 10:00
 2019-05-05 10:00