

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	12-5-2020
Inkoopnummer	301999
Lotnummer	838
Leverancier	Althma
Productnaam of naam fabrikant	5.1.2e
Productiedatum	14-2019-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2 1958

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	100%-	P3
0,5	100%-	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	94	200+
Testpersoon 2	104	49
Testpersoon 3	22	10
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL	<input checked="" type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM	+		
Oordeel AH/TOXI	+		
Algemene bevindingen: STA Rgless -			

5.1.2e

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
g58	<input checked="" type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen:		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2	X-	Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT	nee	>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

Particle Penetration by Kalibra

Datum	12 Mei 2020
Inkoopnummer	301994
LOT/X-nummer	838

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	100%	pass P3	100%	pass P3
Masker 2	100%	pass P3	100%	pass P3
Masker 3	100%	pass P3	100%	pass P3
Totaal gemiddelde	100%	pass P3	100%	pass P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	132	< 240 Pa	pass
Masker 2	174		pass
Masker 3	163		pass

Eindoordeel > 0,3
Voldoet aan P3
Eindoordeel > 0,5
Voldoet aan P3


Fittest by RIVM

Datum	12-5-20
LOT/X-nummer	101030

Fit factor real time test < 10	<input type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	---	--

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. 5.1.2e	Boefje ruim bij kin	94	Deur zit goed	200
2. 5.1.2e		199		49
3. 5.1.2e	neus/ogen lek	22	strak	18
4.				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?		Ja		Nee
			Is één clip voldoende?	Ja

Doos 1
Doos 2

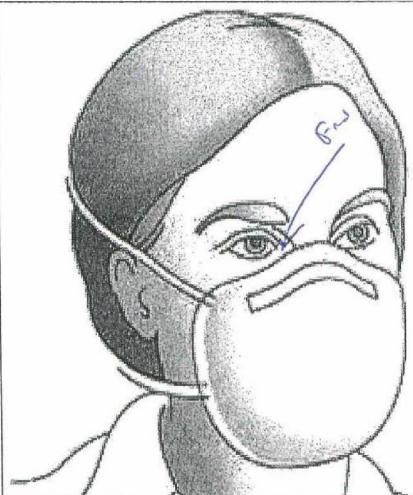

Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)

Type FFP Masker	P3
Fit test (FAIL of PASS)	

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	038
Datum uitvoering check	12-5-2020.		
Leveringsdatum			
Leverancier	Jelle Starbuss / Halma.		
Productnaam of naam fabrikant	Nano Facial Protection Mask.		
Productiedatum			
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM	5.1.2e		
Advies:			
Type masker bij uitgifte:			
FFP2			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Geen info op doos. Geen doc.	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	goed masker, geen verschillen in rondten en grootte deze maskers hebben de juiste elastieken
----------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	25.
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	3D Nano Facial Protective Mask.
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Jiangxi Hornette Industrial.
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Er staat geen sterbus mee op de verpakking.

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: <i>per 5 -</i>
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: KNGS. GB2626-2006
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 à 6
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

- alleen mac masken met grove rand.
- "cude" elastieken

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leakttest	<input checked="" type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input checked="" type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

11-5

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

838

Aantal pallets

11

Totaal stuks

127 000

Aantal samples

75

Totaal aantal na samples

126 925

Aantal per pallet

12 000

Aantal per doos

1000

Aantal per verpakkingseenheid

25

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

950

Inkooporder nummer

301994

LCH-nummer

3057-23160-jelos11

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD


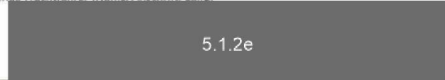
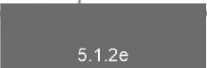
Bijzonderheden:

Locatie:

5.1.2h

ingeboekt door:

4

Exemplaire pour Exemplaar voor Exemplar für		transporteur vervoerder Frachtführer	LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT		CMR	AVC	Code transporteur Vervoerderscode Code Frachtführer	No Nr									
1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) Absender (Name, Anschrift, Land) 5.12e Logistics (Netherlands) B.V. Care of: Halma Solutions BV Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands		2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Empfänger (Name, Anschrift, Land) Centraal Boekhuis Laanakkerweg 14 4131 PB Vianen The Netherlands		16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Schiphol Express Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands		Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.  NL Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedeponneerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.											
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land) Laanakkerweg 14 4131 PB Vianen NL		17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)  5.1.2e		18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers		Dossier: 430/319397 Ref: REF 3057-23160											
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag de Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum) THE NETHERLANDS 1/05/20		5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten Beigefügte Dokumente		6 Marques et numéros / Merken en nummers Kennzeichen und Nummern 157-26341081 TCG2004834AE		7 Nombre de colis / Aantal colli Anzahl der Packstücke 150 176		8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking Art der Verpackung CTNS Face Mask		9 Nature de la marchandise / Aard der goederen Bezeichnung des Gutes		10 No statistique / Statistisch nummer / Statistiknummer		11 Poids brut kg / Bruto gewicht in kg 1455,000 122		12 Cubage m3 / Volume in m3 14,38	
13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Anweisungen des Absenders The receiver of the goods, through signing in box 24, will be liable for the correct and timely processing of the attached NCTS documents (T1). gpl ix Doos Beschadigt		14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift Frachtzahlungsanweisungen <input type="checkbox"/> Franco / Frei <input type="checkbox"/> Non franco / Niet franco / Unfrei		15 Reimbursement / Remboursement / Rückerstattung		19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten Besondere Vereinbarungen In case of discrepancies and/ or events concerning transport & delivery please contact a.s.a.p.: 5.12e Logistics Netherlands 5.1.2e		20		Arrivé heure / Aankomsttijd Ankunftszeit		Départ heure / Vertrektijd Abfahrtszeit		Total heure / Totaaltijd Gesamtzeit			
21 Etablie à / Opgemaakt te Ausgefertigt in Luchthaven Schiphol 1/05/20		22 5.12e Logistics B.V. Care of: Halma Solutions B Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schip The Netherlands		23  5.1.2e Schiphol Shannonweg 1118 LA Luchthaven Schip The Netherlands		24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen Gut empfangen Lieu / Plaats le / de 11-05-20		5.1.2e		5.1.2e		5.1.2e		5.1.2e			

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999

version 3.1 22/05/13 model IRU

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingerahmten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

