


## Fittest by RIVM

Datum	1 mei 2020
LOT/X-nummer	X132 (FIOD 2)

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	--

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. <b>E</b>	Real-time fit < 10		Te ruim	9
2. <b>C</b>	Real-time fit < 10		Te ruim, via bovenzijde veel lekkage	6
3. <b>R</b>	Real-time fit < 10			6
4. <b></b>	Zeer slechte fit, dus alleen met clip testen			
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?				ja
			Is één clip voldoende?	Nee, blijft te ruim

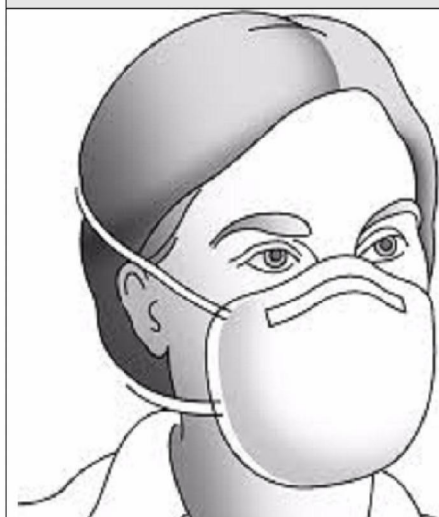

- neusbeugel slap en veert terug
- veel lekkage bij de neus; weinig lekkage bij de kin
- masker blijft slecht zitten tijdens de test
- zonder clip fit < 10
- slappe elastieken

Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is): →  
lekkage bij neus en kin

Type FFP Masker	FFP2
Fit test ( <b>FAIL of PASS</b> )	fail