


Fittest by RIVM

Datum	1 mei 2020
LOT/X-nummer	X135 (FIOD 5)

Fit factor real time test < 10	☒ Ja, test alleen met Clip	☐ Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	--

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. <u>E</u>	Real-time fit < 10		Neusbeugel slap Zit benauwd	15
2. <u>R</u>	Real-time fit < 10			12
3. <u>C</u>	Real-time fit < 10		Te groot; overal lekkage	10
4. <u></u>	Zeer slechte fit, dus alleen met clip testen			
Algemeen: (ruim, krap, etc)	te ruim; blijft niet op zn plaats zitten			
Verschuift bij Up & Down/Bending?				ja
			Is één clip voldoende?	Nee, elastiek te slap

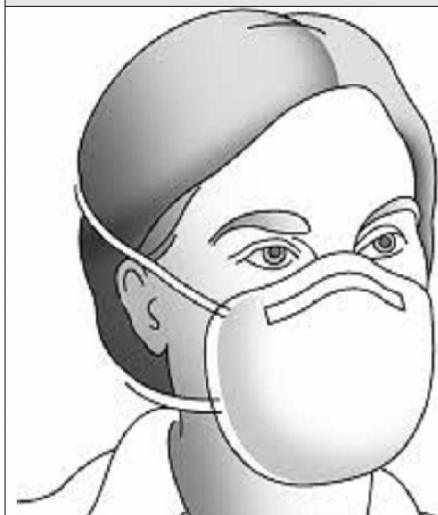

- neusbeugel te slap om goede fit te verkrijgen
- grote kier bij de neus; kan je door naar binnen kijken
- aan het eind van de fittest lichtelijk buiten adem; adem weerstand toename
- zonder clip geen goede fit realiseerbaar

Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is):
→ lekkage bij neus en kin !

Type FFP Masker	FFP2
Fit test (FAIL of PASS)	Fail