

## Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	2-6
Lotnummer	1277
Leverancier/LCH-nummer	
Productnaam of naam fabrikant	UFA - KING Protective Mask
Productiedatum	22/4/2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	<del>974</del> 958

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Type P1/P2/P3
Masker 1	86%	P1
Masker 2	95%	P2
Masker 3	83%	P1

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	n.d.	95
Testpersoon 2	<10 R.T	162
Testpersoon 3	<10 R.T	11
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL <input checked="" type="checkbox"/> PASS	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
958	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	

Algemene bevindingen: Masker maakt op PFE (F1 filterkwaliteit). Verschillende modellen in lot (opdruk, lengte, neusklep) verschilden al lang, kanalen, lengte. Fitvoldoet met inzet r/d clip (2 tot 3 >33). Wel inbrengene partij.

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4	X	Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)	ja	80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

\* Ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

### Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer	303165	LOT-nummer	1277
Datum uitvoering check	2/6/2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	UFA		
Productnaam of naam fabrikant	KN95 Protective Mask.		
Productiedatum	22-4-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie			
Besproken met RIVM			
<b>Advies:</b> <i>Afkeuren</i> <b>Type masker bij uitgifte:</b>			

#### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

#### Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

#### Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	<i>Verschildende maskers in lot. Deel 1; leotere  reclamen. Opdruk op andere zijde. Soms  door kanaal washing per needle. PFE  staat voor P2 kwaliteit. Fit ook wisselend  maar voldoet met in het veld clip roel  (2 vlot 3 533).</i>
--------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>40 stuks in bedrukt zakje</i>
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde, <i>wel geopend.</i> <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:  <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <i>KN95 protective mask.</i>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>UFA</i>
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <i>2 years</i>

## Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER			
1	Zit er verpakking om het masker?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: <i>per 10 in bedrukt zakje</i>		
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>svt</i>

## Bijzonderheden:



HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <i>verschillende maskers qua opbouw, lengte neusstuk, snijlen lang Randbescherming</i>
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>op zateje is een schete.</i>
3	Wat staat er op het masker: <i>KN 95; zateje 1 aan andere zijde</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <i>wid 1.</i> <input checked="" type="checkbox"/> 1 wvl PP <input checked="" type="checkbox"/> 2 m.l. <input checked="" type="checkbox"/> 3 m.b. <input checked="" type="checkbox"/> 4 vilt <input checked="" type="checkbox"/> 5 pp
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input type="checkbox"/> Goed stevig vast <input checked="" type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem: <i>zateje 1 laten elastieken gemakkelijk los.</i> <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof met metalen kern in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/> <i>leupt neusstuk in zateje 1 korter dan 2+3</i>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht? <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest <input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt? <input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>
5	Behoudt de neusklem zijn vorm gedurende circa 1 min? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
6	Chirurgisch masker: Wat is de hoogte van het masker wanneer deze uitgevouwen is?
7	Chirurgisch masker: wat is de lengte van de neusklem?

Bijzonderheden:

*217 voldoet niet in zet v/d clip. Meest verschillende maskers. Hoop adlen weer stand.  
 Re 2 4el 3 > 33*

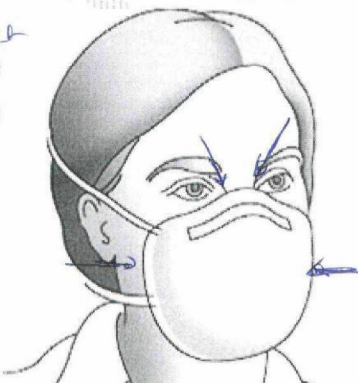
**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

LCH & VWS use only

## Fittest by RIVM

Datum	2/6/2020
LOT/X-nummer	1277

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	--

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
5.1.2e	elastiekbreuk & real time realtime < 10	X		X
		nd		95
		<		162
		< 10		11
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?				Ja
			Is één clip voldoende?	Ja
Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)				
af en toe benadert bril				hoge ademweerstand neemt toe na ~5 minuten  cdli: veel te wijd, veel te veel ruimte, part niet goed ook niet met clip.

Type FFP Masker	nut
Fit test (FAIL of PASS)	pass.

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.



## Particle Penetration by Kalibra

Datum	02-06-2020
Inkoopnummer	303165
LOT/X-nummer	1277

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1 Zak 1	86%	Pass P1	95%	Pass P2
Masker 2 Zak 2	95%	" P2	99%	" P3
Masker 3 Zak 3	93%	" P1	98%	" P2

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	75	< 240 Pa	Pass
Masker 2	98		Pass
Masker 3	75		Pass.

Eindoordeel > 0,3:
<input type="checkbox"/> <80% fail
<input type="checkbox"/> 80-93% voldoet P1
<input type="checkbox"/> 94%-97% voldoet aan P2
<input type="checkbox"/> 98% voldoet aan P3

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.



## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e

Datum: 29-5

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer 1277

Aantal pallets 10

Totaal stuks 163 500

Aantal samples 30

Totaal aantal na samples 163 470

Aantal per pallet 18000

Aantal per doos 1500

Aantal per verpakkingseenheid 10

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: \_\_\_\_\_

Paraaf: \_\_\_\_\_

Artikelnummer: 974

Inkooporder nummer 303165

LCH-nummer 2020-0010-07A

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie: 015-151-03

ingeboekt door:

169

**VRACHTNOTA (B1) / BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor afzender)**  
 uitsluitend voor ongeregeld vervoer - ministeriële regeling 27-12-04/HDJZ/S&W2004-2842

OTX LOGISTICS BV  
 AIRBORNE AVENUE 65  
 2133 LV HOOFDORP  
 Tel. 020 6550010

71500244/00

bevr. code	
	FRANCO
netto vracht	
totaal	
omz. bel.	
vracht incl. o.b.	

het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te amsterdam en rotterdam gedeponeerde algemene vervoercondities 2002, laatste versie.

aan CENTRAAL BOEKHUIS/MEDIQ  
 LAANAKKERWEG 14  
 4131 PB VIANEN

afleveren aan CENTRAAL BOEKHUIS/MEDIQ  
 LAANAKKERWEG 14  
 4131 PB VIANEN

comp.nr afz.	code verv.	frankeringsvoorschrift	per	plaats van afzending	datum
		ONFRANCO	MOTION	OTX LOGISTICS BV	(RTO28/05/2020



71500244/00

AWB : 784-14060244

HAWB: ACA120101953

109 CTNS

1,083.0 Kg

M3

ruimte bestemd voor omschrijving goederen: aantal, verpakking, soort, gewicht en opmerkingen

AANLEVEREN OP 29/05/2020 TUSSEN 10:00 EN 10:10 UUR.

Opmerkingen :

LCH2020-0010-07

\*\* europallets ruilen \*\*

Totaal : 109 Colli

29 MAY '20 12:19

Centraal Boekhuis BV 1,083.0 Kg 0,000 M3  
 Afd. Inkomende Goederen **CB**

niet voor rembourszendingen in de vracht is verzekering niet begrepen	handtekening en datumstempel vervoerder voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening geadresseerde voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
	5.1.2e <i>29.05.20</i>	Getekend voor aantal ontvangen pallets <i>[Handwritten Signature]</i> x pallets 5.1.2e

**OVAL**

# MJH ZORG

DE MAROWIJNE 23  
 1689 AR ZWAAG, THE NETHERLANDS  
 Tel : 0031-(0)229-266472

Datum 28-5-2020

Afleveradres: Mediq Nederland BV  
 Centraal Boekhuis  
 t.a.v. LCH - 5.1.2e  
 Laanakerweg 14  
 4131 PB VIANEN UT  
 NEDERLAND  
 Contactpersoon Mediq: 5.1.2e 5.1.2e

PAKLIJST BEHORENDE BIJ MJH FACTUUR 20400146

Artikelnummer	Ordernummer	Omschrijving	CTN NO.	NO. OF CTN	QTY PER EXP. BOX	TOTAL QTY	G.W KGS	N.W. KGS	MEASUREMENT CM
MJHZFFP2MASKER	LCH2020-0010-07	FFP2 KN95 Mond Maskers	1 - 109	109	1500	163.500	10	9	68,0 x 38,0 x 39,5
				109		163.500			

TOTAL VOLUME: 10,54 CBM  
 TOTAL WEIGHT: 1090,0 KGS (G.W.)  
 KGS (N.W.)

MJH INTERNATIONAL BV

Authorized Signature