

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

| | |
|--|--------------------------|
| Datum | 2-6 |
| Lotnummer | 1276 |
| Leverancier/LCH-nummer | |
| Productnaam of naam fabrikant | 4FA Protective Mask KN95 |
| Productiedatum | 22-H-2028 |
| Type mondmasker (volgens de fabrikant) | 975 958 |

| Q1 Particle Penetration 0,3 | Percentage | Type P1/P2/P3 |
|-----------------------------|------------|---------------|
| Masker 1 | 93% | P2 |
| Masker 2 | 94% | P2 |
| Masker 3 | 53% | Fail (P) |

| Q2 Fit test | Zonder clip | Met clip |
|---------------|---|----------|
| Testpersoon 1 | < 10 n.t | 10,6 |
| Testpersoon 2 | 20 | 10,9 |
| Testpersoon 3 | < 10 n.t | 6,8 |
| FFP2 | <input type="checkbox"/> FAIL <input checked="" type="checkbox"/> PASS ; <i>Maak verschillende maskers!</i> | |

| Q3 en Q4 | + | +/- | - |
|-----------------|---|-----|---|
| Oordeel RIVM | | | — |
| Oordeel AH/TOXI | | | — |

| Artikelnummer VWS | Quality Check | Uitleg indien ON HOLD: |
|--|--|------------------------|
| 958 | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold | |
| Algemene bevindingen: <i>PFE faalt! (zak 3: 53%). Fittest voldoet, maar met opmerking dat maskers versluiten. Niet inzet clip. Versluitende maskers qua afmetingen, neuskleem etc. Inhomogene partij</i> | | |

| Logistiek | Aankruisen | Classificatie | Clip (Ja/Nee) | Specs. | |
|-----------|------------|--|---------------|-------------|--------------|
| | | | | PFE | FIT |
| Mand 1 | | Goedkeur: FFP2 | | >94% | >100 |
| Mand 2 | | Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT | | >94% | 33<FIT<100 |
| Mand 3 | | Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit* | | 80%<PFE<94% | >100 |
| Mand 4 | | Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57) | | 80%<PFE<94% | 33<FIT<100 |
| Mand 5 | | Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood | | >94% | <33 |
| Mand 6 | | Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood | | 80%<PFE<94% | <33 |
| Mand 7 | X | Afkeur: Niet gebruiken | ja | < 80 | Ongeacht fit |

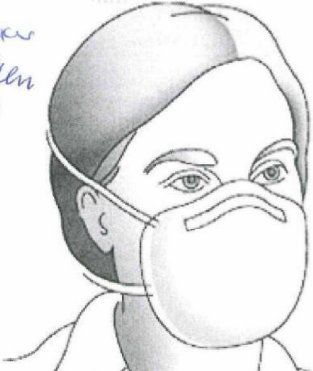
* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Fittest by RIVM

| | |
|--------------|------------------------|
| Datum | 27 2 - juni |
| LOT/X-nummer | 1276 |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Fit factor real time test < 10 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip | <input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam |
|--------------------------------|--|--|

| Tester: | Zonder clip of kam | | Met clip of kam | |
|--|----------------------------|-------|----------------------------|-------|
| | Opmerkingen | Score | Opmerkingen | Score |
| 5.1.2e | real time | <10 | part jeel maar mil bedaat. | 196 |
| | 22 ey min Maan part wel | 20 | | 189 |
| | real time | <10 | | 63 |
| 4. _____ | | | | |
| Algemeen: (ruim, krap, etc) | | | | |
| Verschuift bij Up & Down/Bending? | | | Zonder clip wel | |
| | | | Is één clip voldoende? | |
| Ja | | | | |
| Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is) | | | | |
| adent wel 20 min na ~10 minuten  <div style="float: right; text-align: right;"> NB Zak 2 totaal ander masker dan Zak 1 en 3 </div> | | | | |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Type FFP Masker | pa 5.1.2e | alham zak 1 en 3 |
| Fit test (FAIL of PASS) | | |

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|------|
| Inkoopnummer | 303164 | LOT-nummer | 1276 |
| Datum uitvoering check | 2/6/2020 | | |
| Leveringsdatum | th | | |
| Leverancier | UFA | | |
| Productnaam of naam fabrikant | KN95 Protectore Mask. | | |
| Productiedatum | 22-4-2020 | | |
| Naam | 5.1.2e | | |
| Functie | | | |
| Besproken met RIVM | | | |
| Advies: | Alleen | | |
| Type masker bij uitgifte: | | | |

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| Technical data sheet aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Garantiecertificaat aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Declaration of conformity aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Oordeel van RIVM | | |

Prestatie levering

| | |
|----------------------------|--|
| Oordeel arbeidshygiënisten | Verschuillende maskers in lot nr. Qua afmetingen; PFE test (zale 2: 53%!); fit geeft ook fail bij zale 2. Randmontage is verschuillend. Neusklein bij 1 anders (smaller). Opdruk ook |
|----------------------------|--|

| BINNENDOOS/PLASTICZAK | |
|-----------------------|--|
| 1 | Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>10</i> |
| 2 | Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde, <i>maar wel geopen</i> <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl: |
| 3 | Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <i>KN95 Protective Mask</i> |
| 4 | Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>UFA</i> |
| 5 | Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| 6 | Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen |
| 7 | Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <i>realis</i> <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt |
| 8 | Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t. |
| 9 | Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <i>2 years</i> <input type="checkbox"/> Nee |

Bijzonderheden:

| VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER | |
|------------------------------------|--|
| 1 | Zit er verpakking om het masker? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| | Zo ja: <i>10 stuks in bealmdit zaleje</i> |
| 2 | Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk |
| 3 | Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>net</i> |

Bijzonderheden:

| HET MASKER | |
|------------|---|
| 1 | Algemene indruk masker? <input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <i>- verschromte maskers in lot: qua afmetingen, neus beupel; Randmaskering opbreuk etc.</i> |
| 2 | Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: |
| 3 | Wat staat er op het masker: <i>2061 KN95 2062 + 3 KN95 2x</i> |
| | Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t. |
| | Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t. |
| 4 | Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| 5 | Aantal lagen van het masker: <i>uit 142 uit 3</i> <input checked="" type="checkbox"/> 1 PPwilt <input checked="" type="checkbox"/> 2 mb. <input checked="" type="checkbox"/> 3 m.b. <input checked="" type="checkbox"/> 4 wilt <input checked="" type="checkbox"/> 5 wilt <i>uit 3</i> <input checked="" type="checkbox"/> 1 PPwilt <input checked="" type="checkbox"/> 2 mb. <input checked="" type="checkbox"/> m.b. <input checked="" type="checkbox"/> wilt <input checked="" type="checkbox"/> wilt |
| 6 | Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <i>duur</i> |
| 7 | Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes |
| 8 | Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v. |
| 9 | Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input type="checkbox"/> Goed stevig vast <input checked="" type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem, <i>sommige laten gemakkelijk?</i> <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los |
| 10 | Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof; <i>doos 1 smaller dan 2+3</i> <input type="checkbox"/> Kunststof met metalen kern in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/> |

Bijzonderheden:

zie foto's

| DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 1 | Hoe past het masker op het gezicht? | <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/> |
| 2 | Waar ontsnapt lucht bij de leaktest | <input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch) |
| 3 | Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| 4 | Wat gebeurt er als het gezicht beweegt? | <input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/> |
| 5 | Behoudt de neusklem zijn vorm gedurende circa 1 min? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| 6 | Chirurgisch masker: Wat is de hoogte van het masker wanneer deze uitgevouwen is? | |
| 7 | Chirurgisch masker: wat is de lengte van de neusklem? | |

Bijzonderheden:

*Verskillende maskers!
 De 2e foto is de fit. Andere voldoen niet met het clip wel. Vanwege verschillende maskers in lot, voldoet het masker niet.*

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

LCH & VWS use only

Particle Penetration by Kalibra

| | |
|--------------|------------|
| Datum | 02.06.2020 |
| Inkoopnummer | 303164 |
| LOT/X-nummer | 1276. |

| Q1 Particle Penetration | Gemiddelde rendement > 0,3 | Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3 | Gemiddelde rendement > 0,5 | Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3 |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Masker 1 Zakje 1 | 98% | Pass P2 | 100% | Pass P3 |
| Masker 2 Zakje 3 | 94% | Pass P2 | 98% | Pass P2 |
| Masker 3 Zakje 2 | 53% | Fail. | 73% | Fail. |

Ademweerstand:

| | Gemeten (< Pa) | Eis (< Pa) | Conclusie |
|----------|----------------|------------|-----------|
| Masker 1 | 173 | < 240 Pa | Pass |
| Masker 2 | 114 | | Pass |
| Masker 3 | 91 | | Pass. |

| Eindoordeel > 0,3: |
|---|
| <input type="checkbox"/> <80% fail |
| <input type="checkbox"/> 80-93% voldoet P1 |
| <input type="checkbox"/> 94%-97% voldoet aan P2 |
| <input type="checkbox"/> 98% voldoet aan P3 |

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

NOTA (B1) / BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor afzender)
 voor ongeregeld vervoer - ministeriële regeling 27-12-04/HDJZ/S&W2004-2842

LOGISTICS BV
 BORNE AVENUE 65
 2133 LV HOOFDDORP
 Tel. 020 6550010

71500238/00

| | |
|-------------------|--------|
| bevr. code | |
| | FRANCO |
| netto vracht | |
| totaal | |
| omz. bel. | |
| vracht incl. o.b. | |

het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te amsterdam en rotterdam gedeponeerde algemene vervoercondities 2002, laatste versie.

aan CENTRAAL BOEKHUIS/MEDIQ
 LAANAKKERWEG 14
 4131 PB VIANEN

afleveren CENTRAAL BOEKHUIS/MEDIQ
 LAANAKKERWEG 14
 4131 PB VIANEN

| | | | | | |
|--------------|------------|------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| comp.nr afz. | code verv. | frankeringsvoorschrift | per | plaats van afzending | datum |
| | | ONFRANCO | MOTION | OTX LOGISTICS BV (RT029/05/2020 | |



71500238/00

AWB : 784-14060222

HAWB: ACA120101951

126 CTNS

1,262.0 Kg

M3

ruimte bestemd voor omschrijving goederen: aantal, verpakking, soort, gewicht en opmerkingen

AANLEVEREN OP 29/05/2020 TUSSEN 10:00 EN 10:10 UUR.

Opmerkingen : LCH2020-0010-08

** GELADEN OP 11 EUROPALLETS **

** EUROPALLETS GRUILD **

Totaal : 126 Colli

29 MAY '20 12:19

1.262,0 Kg 0,000 M3

Centraal Boekhuis BV
 Afd. Inkomende Goederen



| | | |
|--|---|---|
| niet voor rembourszendingen in de vracht is verzekering niet begrepen | handtekening en datumstempel vervoerder voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief | handtekening en gestempeld vervoeradres voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief |
| | 5.1.2e | Gefactureerd voor aantal ontvangen pallets x pallets |
| OVAL | | 5.1.2e |

JRG

LINE 23

WILLEM-ALEXANDER ZWAAG, THE NETHERLANDS

Tel : 0031-(0)229-266472

Datum 29-5-2020

Afleveradres:

Mediq Nederland BV

Centraal Boekhuis

t.a.v. LCH - 5.1.2e

Laanakkerweg 14

4131 PB VIANEN UT

NEDERLAND

Contactpersoon Mediq:

5.1.2e

PAKLIJST BEHORENDE BIJ MJH FACTUUR 20400146

| Artikelnummer | Ordernummer | Omschrijving | CTN NO. | NO. OF CTN | QTY PER EXP. BOX | TOTAL QTY | G.W KGS | N.W. KGS | MEASUREMENT CM |
|----------------|-----------------|------------------------|---------|------------|------------------|-----------|---------|----------|--------------------|
| MJHZFFP2MASKER | LCH2020-0010-08 | FFP2 KN95 Mond Maskers | 1 - 126 | 126 | 1500 | 189.000 | 10 | 9 | 68,0 x 36,0 x 39,5 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 126 | | 189.000 | | | |

TOTAL VOLUME :

12,18 CBM

TOTAL WEIGHT:

1260,0 KGS (G.W.)

1134,0 KGS (N.W.)

MJH INTERNATIONAL BV

Authorized Signature



Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

29-5

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

1276

Aantal pallets

11

Totaal stuks

189.000

Aantal samples

30

Totaal aantal na samples

188.970

Aantal per pallet

18000

Aantal per doos

1500

Aantal per verpakkingseenheid

10

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

974

Inkooporder nummer

303164

LCH-nummer

2020-0010-08A

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

018-152-03
172

ingeboekt door: