

oodsrapport van 5.1.2h

Inslag Nr.: **87368** Dossier Nr.: **66868**

Datum: **24-03-2020**  
 Klant: ERASMUS MEDISCH CENTRUM  
 Autonr.: 55-BNZ-9 /  
 Referentie: 999-75693424

Goederen omschrijving: MONDKAPJES FFP 2  
 Aantal colli: 30000 PCS  
 Aantal pallets: 2 Hoeveelheid per pallet: 15000,00  
 Bruto gewicht: 0 KG  
 Containers:

Staat van de goederen: *goed*

Aantal stuks met schade: *—*

Schade:

Lot nr.:

Hout / Plastic / Euro-pallet :

Prod. Datum:

Gelost door:

T.H.T.

Geteld door:

5.1.2e

Pallefactor

Overige opmerkingen:

Gelost in vak/loods/stelling: *4*

Opmerkingen voordat er gelost gaat worden:  
 2 PALLETS  
 25 DOZEN  
 30000 STUKS

ATTENTIE CHAUFFEURS:

VOOR AANVANG VAN HET LOSSEN AAN DE RAMPEN 1 T/M 4  
EERST EEN WIELKEG VOOR DE WIELEN LEGGEN !!!!!!!!!!!!!!!

Exemplaire pour Exemplaar voor Exemplar für		destinataire geadresseerde Empfänger	LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT		CMR	AVC-2002	Code transporteur Vervoerderscode Code Frachtführer	No Nr
1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) MOL Logistics (Netherlands) B.V. Care of: Halma Solutions BV Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands					Incident de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen: zijn het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.			
5.1.2h					16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Schiphol Express Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands			
4					17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)			
18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers					18			
naming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum) THE NETHERLANDS 24/03/20					18			
5 Documents annexes / Bijgevoegde documenten Beigefügte Dokumente AWB/INV					Dossier: 430/008587 Ref: DISPOSABLE FACE MASK			
6 Marques et numéros / Merken en nummers Kennzeichen und Nummern		7 Nombre de colis / Aantal colli Anzahl der Packstücke	8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking Art der Verpackung	9 Nature de la marchandise / Aard der goederen Beschreibung des Gutes	10 Numéro statistique / Statistisch nummer / Statistieknummer	11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg	12 Cubage m <sup>3</sup> / Volume in m <sup>3</sup> Umlage in m <sup>3</sup>	
999-75693424 TCG2003700AE		25	CTNS DISPOSABLE FACE MASK			238,000	3,42	572
13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Anweisungen des Absenders The receiver of the goods, through signing in box 24, will be liable for the correct and timely processing of the attached NCTS documents (T1).					19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten Besondere Vereinbarungen In case of discrepancies and/ or events concerning transport & delivery please contact a.s.a.p.: MOL logistics Netherlands 5.1.2e			
14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift Frachtzahlungsanweisungen <input checked="" type="checkbox"/> Franco / Frei <input type="checkbox"/> Non franco / Niet franco / Unfrei					20 A payer par / te betalen door / Zu zahlen vom Expéditeur / Afzender Absender			
21 Etablie à / Opgemaakt te Ausgefertigt in					15 Remboursement / Rückerstattung			
22 Luchthaven Schiphol 24/03/20					24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen			
MOL Logistics Care of: Halma Solutions B Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands					Schiphol Express Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands			
Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders					Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers			
Signature et timbre du destinataire / Handtekening en stempel van de geadresseerde / Unterschrift und Stempel des Empfängers					Signature et timbre du destinataire / Handtekening en stempel van de geadresseerde / Unterschrift und Stempel des Empfängers			

Model IRU / Auteursrecht sVa / Stichting Vervoeradres - 's-Gravenhage

www.beurtvaartadres.nl

51.26

Uitgave Beurvaartadres

Art. 3004

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingerahmten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

1-15 verschillende

A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders



LA 4Z  
NK

999-75693424

TCG2003700AE

Shipper's Name and Address ANHUI WHYWIN INTERNATIONAL CO., LTD 5/F PUBLICATION AND MEDIA PLAZA NO.1118 SHENGQUAN RD. HEFEI ANHUI PROVINCE P.R.CHINA PC 230071		Shipper's Account Number		Not negotiable			
Consignee's Name and Address Halma solutions Bijsterhuizen 3007G 6604 LP Netherlands 5.1.2e 00 5.1.2e		Consignee's Account Number		Copies 1, 2 and 3 of this Air waybill are originals and have the same validity. It is agreed that the goods described herein are accepted for carriage in apparent good order and condition (except as noted) and SUBJECT TO THE CONDITION OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTION ARE IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.			
Issuing Carrier's Agent Name and City SAME AS CONSIGNEE		Accounting Information FREIGHT COLLECT		Agent's IATA Code Account Number			
Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing PVG		MAWB No.		Declared Value for Carriage Declared Value for Customs			
to By First Carrier Routing and Destination to by to by		Currency USD		WT/MAL COLL PPD CC			
Airport of Destination AMS		Requested Flight/Date CA1023 24.MAR		Amount of Insurance NIL			
Handling Information		INSURANCE — If carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "Amount of Insurance".		NVD NCV			
No. of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (Incl. Dimensions or Volume)
25	238	K		570	AS ARRANGED		Disposable face mask
Prepaid		Weight Charge		Collect		Other Charges	
		Valuation Charge		AS ARRANGED			
		Tax					
Total Other Charges Due Agent						Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.	
Total Other Charges Due Carrier						Signature of Shipper or his Agent	
Total Prepaid		Total Collect		AS ARRANGED			
Currency Conversion Rate		CC Charges in Dest. Currency		AS ARRANGED		Executed on (date) at (place) Signature of Issuing Carrier or Its Agent	
For Carrier's Use Only at Destination		Charges at Destination		Total Collection Charges		TCG2003700AE	

**ANHUI WHYWIN INTERNATIONAL CO., LTD**  
 5/F PUBLICATION AND MEDIA PLAZA NO.1118 SHENGQUAN RD.  
 HEFEI ANHUI PROVINCE P.R.CHINA PC 230071

**\*\*\* COMMERCIAL INVOICE \*\*\***

TO: HALMA SOLUTIONS B.V. INVOICE NO. : AHW19A090340-5B  
 Bijsterhuizen 3007G 6604 LP Wijchen DATE Mar 21,2020  
 P.O. Box 52 6600 AB Wijchen, The Netherlands PAYMENT : BY T/T

FROM SHANGHAI CHINA TO THE NETHERLANDS BY AIR

MARKS AND NOS.	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE (USD)	AMOUNT (USD)
N/M	MASK	5.1.1c	PCS/ CTNS	\$32,500.00
	TOTAL	5.1.1c	PCS/ CTNS	\$32,500.00

FCA SHANGHAI by air

SAY TOTAL U.S. DOLLARS THIRTY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED ONLY 安徽华文国际经贸股份有限公司  
 ANHUI WHYWIN INTERNATIONAL CO., LTD.

\*\*\*\*\*  
 5.1.2e

**BANK INFORMATION**

**BANK NAME:** CHINA CITIC BANK, HEFEI BRANCH **ADDRESS:** 78 HUIZHOU ROAD HEFEI CHINA, PC CODE 230001  
**SWIFT CODE:** 5.1.5 **ACCOUNT NO.:** 5.1.5  
**BENEFICIAL:** ANHUI WHYWIN INTERNATIONAL CO., LTD  
**ADDRESS:** PUBLICATION&MEDIA PLAZA, NO.1118, FEICUI ROAD, HEFEI, ANHUI, CHINA,  
 PC CODE 230071

**ANHUI WHYWIN INTERNATIONAL CO., LTD**  
 5/F PUBLICATION AND MEDIA PLAZA NO.1118 SHENGQUAN RD.  
 HEFEI ANHUI PROVINCE P.R.CHINA PC 230071

**\*\*\* PACKLING LIST \*\*\***

TO: HALMA SOLUTIONS B.V. INVOICE NO : AHW19A090340-5B  
 Bijsterhuizen 3007G 6604 LP Wijchen DATE Mar 21,2020  
 P.O. Box 52 6600 AB Wijchen, The Netherlands PAYMENT : BY T/T

MARKS AND NOS.	DESCRIPTION	QTY			G.W(KG)	N.W (KG)	MEAS. (CBM)	
N/M	MASK	25000	PCS/	25	CTNs	238.00	210.00	3.422
	<b>TOTAL</b>	<b>25000</b>	<b>PCS/</b>	<b>25</b>	<b>CTNS</b>	<b>238.00</b>	<b>210.00</b>	<b>3.422</b>

\*\*\*\*\* 安徽为什么赢国际有限公司 \*\*\*\*\*  
 ANHUI WHYWIN INTERNATIONAL CO., LTD.  
 TOTAL: PACKED IN TWENTY FIVE(25) CTNS ONLY

高翔

### Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inslagnummer of Gift-nummer	07360.	
Leverancier	tongjian.	
Productnaam	3D folding disposable mask	
Datum	24-3-2020	
Naam	5.1.2e	
Functie	5.1.2e	5.1.2e
Besproken met RIVM	5.1.2e	5.1.2e
<b>Advies:</b> Type masker bij uitgifte:		

#### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

#### Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

#### Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	- bruikbaar, suboptimale fit - FFP2 - inhoud van doos is niet altijd hetzelfde zie nr 07367 en 07393 1 2 4 zelfde doos, met andere inhoud. we willen daarom graag alle batches controleren
----------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? 50. (25, per 2 verpakt).
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:  <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? 3D folding disposable mask.
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? tongjian.
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> Anders: GB2626-2006. <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t. met geheel
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee Chinees?

## Bijzonderheden:

in instructie → lange elastieken, wijpt niet.

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Zo ja: <i>om 2 maskers</i>		
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>KNGS wel op masker, niet op doos</i>

Bijzonderheden:

*andere aanhechting elastieken  
op verpakking van masker zelf  
staat niet.*

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>nie vorige pagina</i>
3	Wat staat er op het masker: <i>ICNGS.</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <i>buiten</i> <i>elektro-</i> <i>netwerk</i> <i>valtig</i> <i>valtig</i> <i>binnen</i> <i>laant.</i>
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input type="checkbox"/> Erop gestanst <input checked="" type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Mentaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Mentaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>


Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed / redelijk <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input checked="" type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift licht <input type="checkbox"/>


## Bijzonderheden:

- draagt moeilijk samen met bril. (masker hoog op de neus)
- bril bestaat; er komt lucht vrij
- masker loopt in een punt bij de neus
- na paar x buigen is het metaal gebroken

suboptimale fit, wel bruikbaar.

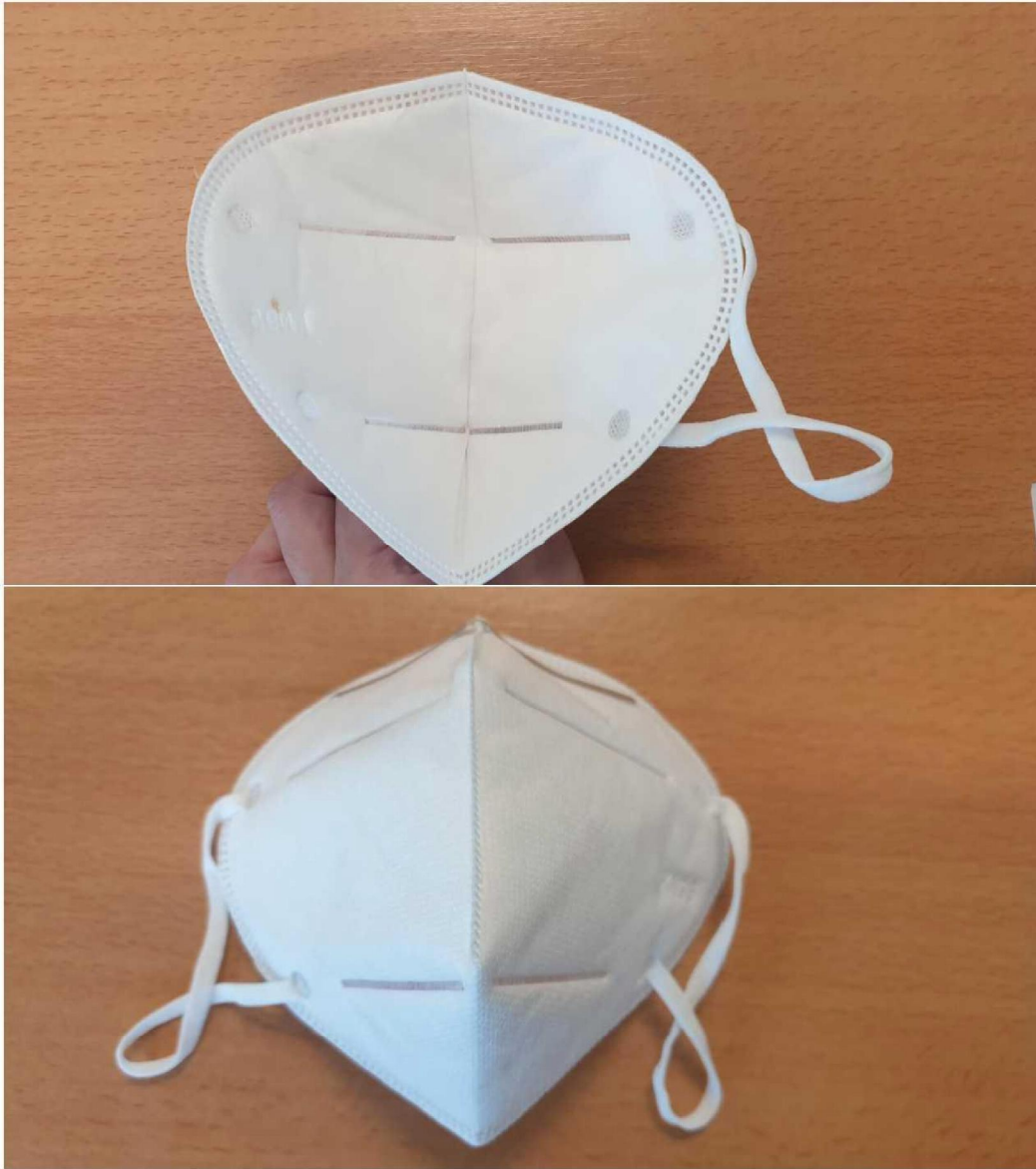



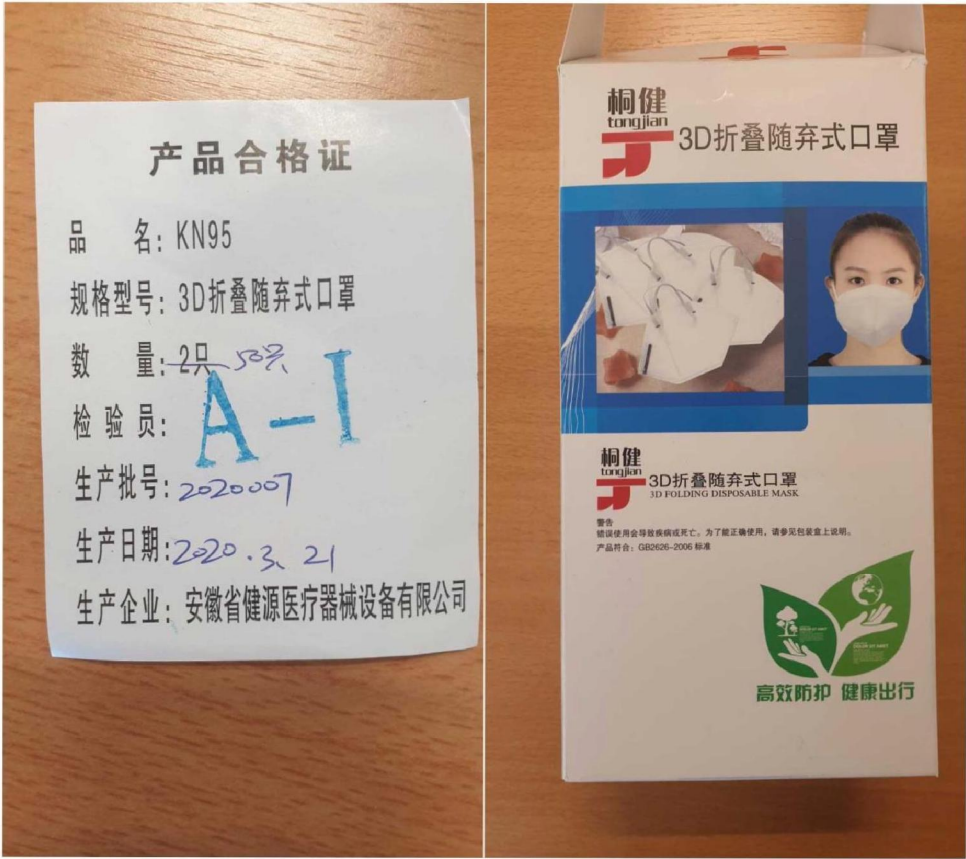

产品合格证

品名: KN95  
规格型号: 3D折叠随弃式口罩  
数量: 2只 <sup>50只</sup>  
检验员: A-I  
生产批号: 2020007  
生产日期: 2020.3.21  
生产企业: 安徽省健源医疗器械设备有限公司

桐健  
tongjian  
3D折叠随弃式口罩



桐健  
tongjian  
3D折叠随弃式口罩  
3D FOLDING DISPOSABLE MASK

警告  
错误使用会导致疾病或死亡。为了正确使用，请参见包装上说明。  
产品符合: GB2626-2006 标准



高效防护 健康出行